

# Veido kaukė



## Naudojimo instrukcija

Standartas: EN 149:2001+A1:2009

Pagal Reglamentą (EU)2016/425

### Naudojimo instrukcija

1. Nesilaikant visų nurodymų ir apribojimų, ši veido kaukė gali būti mažai veiksminga, gali sukelti ligą, sužeidimus arba mirtį.
2. Būtina teisingai pasirinkti veido kaukę, prieš pradėdamas naudoti. Darbdavys turi išmokyti naudotoją, kaip tinkamai naudoti veido kaukę, laikantis galiojančių saugos ir sveikatos standartų..
3. Ši veido kaukė nepateikia deguonies. Naudokite tik tinkamai vėdinamoje patalpoje, kurioje yra pakankamai deguonies, kad palaikytumėte gyvybę.
4. Išmeskite veido kaukę ir pakeiskite ją nauja, jei kaukė dalelių filtro pusėje yra pernelyg užsikimšusi, dėl ko pasunkėja kvėpavimas arba pažeista dalelių filtro pusė.
5. Palikite užterštą vietą, jei atsiranda galvos svaigimas, sudirginimas ar kiti nemalonūs pojūčiai.



CE 2834






### Naudojimo apribojimas

1. Nenaudokite veido kaukės, neįėjus į užterštą teritoriją ir nebūkite joje esant tokioms aplinkybėms:
  - a) Atmosferoje yra mažiau kaip 19,5% deguonies.
  - b) Jei jaučiate ar užuodžiate taršą
  - c) Apsaugai nuo dujų ar garų.
  - d) Teršalai ar jų koncentracijos nežinomi arba yra tiesiogiai pavojingi gyvybei ar sveikatai.
  - e) Smėliavimui, dažų purškimui ir asbestui valyti.
  - f) povandeninėje, ugnies ir sprogiroje aplinkoje.
2. Nekeiskite ir nenaudokite kaukės neteisingai.
3. Nenaudokite veido kaukės su veido plaukais (barzda, ūsai) ar kitomis sąlygomis, kurios gali trukdyti gerai užmaskuoti veidą, nes tai gali nutekėti.
4. Veido kaukę prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti, kad įsitikintumėte, jog kvėpavimo zonoje nėra jokių skylių, išskyrus pradūrimus aplink ir kabės, ir ar jos nepažeistos. Padidėjusios skylės, atsirandančios dėl suplėštos ar suplėštos filtrų medžiagos aplink spaustukus, laikomos pažeidimais.
5. Ši veido kaukė padeda apsaugoti nuo tam tikrų kietų dalelių teršalų, tačiau nepašalina rizikos užsikrėsti liga ar infekcija. Neteisingas naudojimas gali baigtis liga ar mirtimi.
6. Ši veido kaukė, pažymėta „NR“, turi būti naudojama tik vieną kartą.

### Montavimo instrukcija

1. Atidarykite veido kaukę, nukreiptą į kaukės vidų, ir kaukę laikykite ant kiekvienos rankos taip, kad nosies spaustukas būtų viršuje.
2. Išimkite laikiklį iš pakuotės ir pritvirtinkite vieną laikiklio spaustuko galą vienoje kaukės pusėje.
3. Laikykite veido kaukę vietoje, ant nosies ir burnos, ir užfiksuokite kitą laikiklio spaustuko galą kitoje kaukės pusėje.
4. Nustatykite į patogią padėtį ir pasirūpinkite, kad kaukė atitiktų veidą.
5. Sulenkite nosies spaustuką, kad aplink nosį būtų sandaru.
6. Tinkamas patikrinimas
  - a) Norėdami patikrinti veido kaukės tinkamumą, uždėkite abi rankas ant kaukės ir greitai įkvėpkite. Jei nosies srityje jaučiamas oro srautas, sureguliuokite / priveržkite nosies spaustuką.
  - b) Jei aplink veido kaukės kraštus jaučiamas oro srautas, pareguliuokite kaukės dirželius, kad būtų geriau.
7. Nedelsdami pakeiskite veido kaukę, jei pasidaro sunku kvėpuoti arba dalelių filtravimo kaukė yra pažeista ar iškreipta.
8. Pakeiskite veido kaukę, jei neįmanoma tinkamai uždengti veido.
9. Atidus šių nurodymų laikymasis yra svarbus saugaus veido kaukės naudojimo žingsnis.

# Veido kaukė

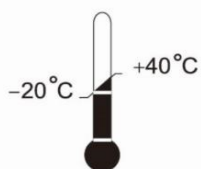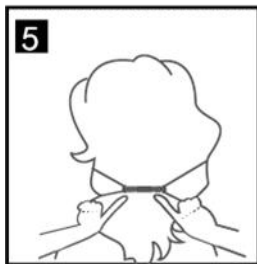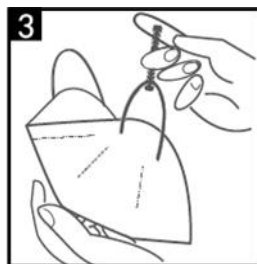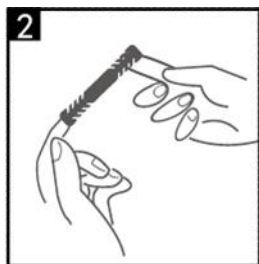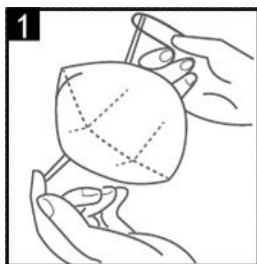

Laikymo temperatūros diapazonas



Maksimali santykinė laikymo sąlygų drėgmė



Žr. gamintojo pateiktą informaciją.



Art. Nr.  
RND 600-00258